


СОБЕРИТЕ ВЕСЫ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:

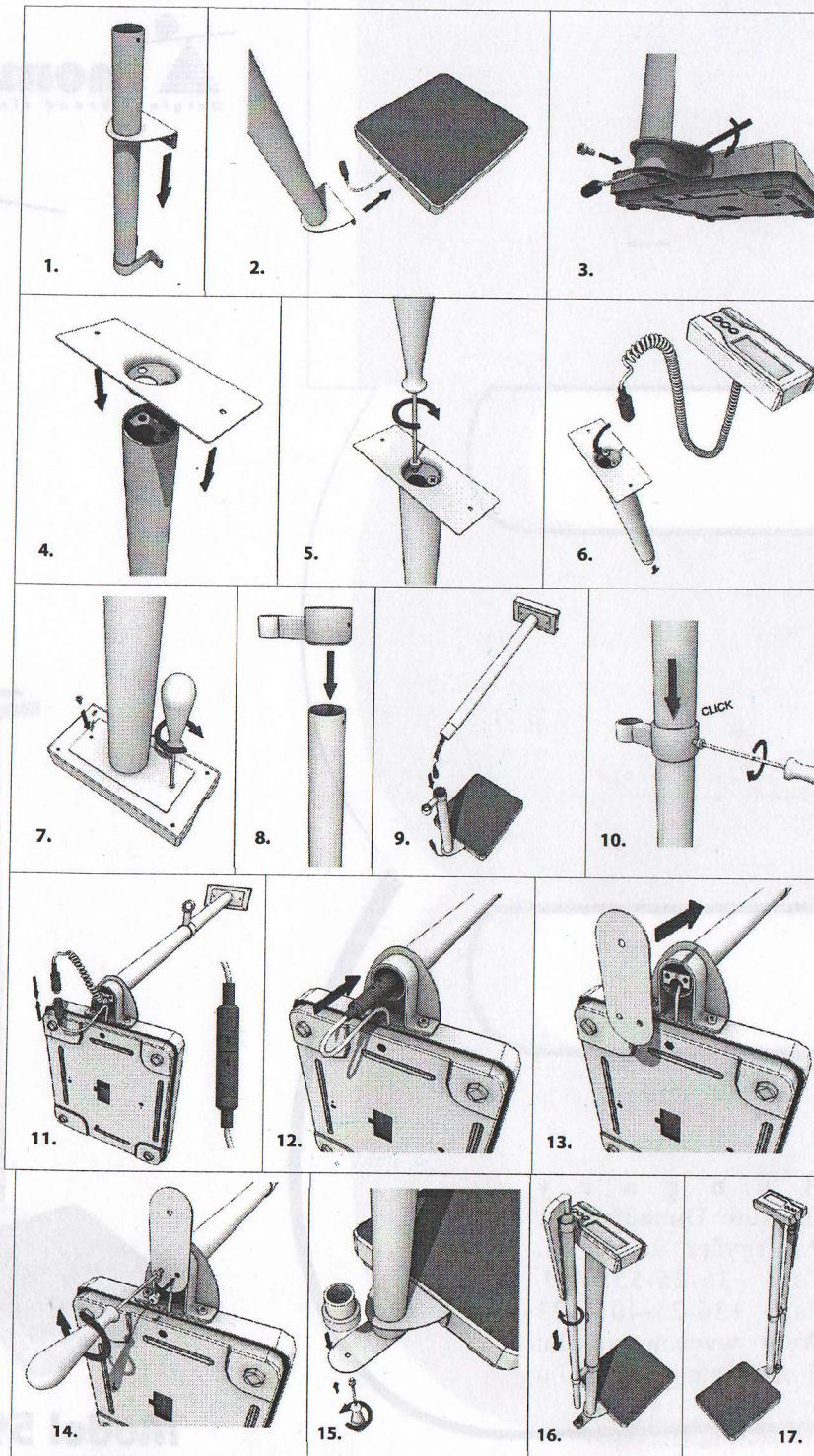

Инструкция по применению

Электронные персональные весы с ростомером Модель № 5964

Благодарим Вас за приобретение изделия марки "Momert" и надеемся, что Вы останетесь довольны нашим изделием в течение всего срока его службы.

Перед использованием весами просим внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией!

Проследите, чтобы другие лица, которые будут пользоваться изделием, также ознакомились с данным руководством. Сохраните руководство по эксплуатации.

МЕРЫ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ:

- Соблюдайте указанную полярность батареек при их установке и замене.
- Перед подключением прибора в розетку убедитесь, что номинальное напряжение, указанное на адаптере соответствует местному напряжению электросети.
- Если Вы не собираетесь пользоваться прибором длительное время, выньте из него батареики, выключите его и вытащите кабель питания из розетки!
- Для подключения весов к сети пользуйтесь только адаптером, входящим в комплект поставки.
- В конструкцию адаптера входит трансформатор. Запрещается заменять адаптер или производить замену оригинальной вилки на какую-либо другую: это опасно. При повреждении адаптера, заменяйте его оригинальным адаптером, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора.
- Во избежание поражения электрическим током не подключайте кабель питания в розетку мокрыми руками (это опасно).
- Не оставляйте используемый прибор без присмотра.
- Только лица, ознакомленные с инструкцией по применению и лица с опытом, могут пользоваться прибором. Не разрешайте без присмотра пользоваться прибором детям и недееспособным людям (из-за их ограниченной подвижности или сниженных умственных способностей). Пользуйтесь прибором в недоступном для них месте.
- Будьте особо осторожны, если прибор используется вблизи детей. Убедитесь в том, что прибор (и его упаковка) не служит детям игрушкой.

Будьте особенно осторожны, если прибор используется вблизи детей. Убедитесь в том, что прибор (и его упаковка) не служит детям игрушкой.


ДИСПЛЕЙ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Диапазон измерения веса: 2-200 кг, градация: 100 гр
- Диапазон измерения высоты: 81 - 210 см Градация: 0,5 см
- Измерительная поверхность белого цвета с предотвращающим скольжение покрытием
- Весы функционируют посредством 4-х измерительных сенсоров высокой точности
- Дисплей 1' LCD, расположенный на верху стойки
- Источник питания: 9 V батарейка или сетевой адаптер (принадлежность весов)
- Функционирование кнопок подтверждается звуковым сигналом
- Весы могут работать в диапазоне температур +10 °C - +40 °C.
- Наиболее точные результаты измерений обеспечиваются при температуре +25°C.

АДАПТЕР

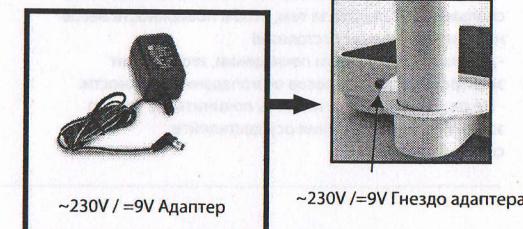

РАБОТА ВЕСОВ

1. Включите весы нажатием кнопки ON/OFF. Нажмите кнопку два раза друг за другом, на дисплее появится и мигает показатель высоты роста.
2. Чтобы пользоваться ростомером, сперва указатель уровня ростомера надо поставить в горизонтальное положение, а потом с помощью выдвижного прута можно измерить высоту роста.
3. Надо углядеть за том, чтобы части выдвижного прута вытягивать следующим способом:
Вытяжка: сперва прут меньшего диаметра (до отказа), а потом прут большего диаметра.
Прут обратно на место: сперва прут большего диаметра (до отказа), а потом прут меньшего диаметра.
4. Установите значение Вашего роста посредством нажатия кнопок с обозначением вверх и вниз.
5. После этого нажмите кнопки SET зафиксируйте установленное значение. На дисплее появляется значение "0.0", то есть весы готовы к измерению веса.
6. Осторожно встаньте на платформу весов, равномерно распределив свой вес на платформе. Постарайтесь не двигаться, пока на дисплее во второй раз не покажутся цифры. Затем на экране появится Ваш вес.
7. Если после измерения один раз нажать кнопку BMI, весы произведут расчет показателя BMI.
8. Показатель веса и рассчитанного индекса BMI, сменяя друг друга, 5 раз мигнут на дисплее, затем через 30 секунд весы автоматически выключатся.
9. Если Вы хотите выключить весы еще до истечения 30 секунд, нажмите раз на кнопку ON/OFF. Показатель роста, естественно, останется сохраненным весами.

BMI индекс = вес / высота²

Очень худой	Худой	Нормальный	Толстый	Ожиревший
<18,5	18,5 - 22,9	23 - 24,9	25 - 29,9	≥30

Функция TARE

При нажатии кнопки TARE после измерения веса, на дисплее появляется значение "0.0", то есть весы готовы для измерения следующего веса.




Советы к пользованию и поддержанию технического состояния весов:

- Убедитесь в том, что весы стоят на гладкой, ровной и жесткой поверхности.
- Неровность поверхности, на которую установлены весы, может привести к некорректности результатов измерений.
- Не пользуйтесь весами при очень высокой и очень низкой температуре воздуха или во влажной среде.
- Не подвергайте весы резким нагрузкам и оберегайте от падения, поскольку они являются точным электронным оборудованием.
- Не перегружайте весы! Электронные части их могут от перегрузки повредиться или даже выйти из строя.
- Следите за чистотой весов. Чистку весов осуществляйте слегка влажной тряпочкой. При чистке весов не пользуйтесь химическими веществами, это может привести к повреждению их. Не погружайте весы в воду.
- Если Вы пользуетесь весами не часто или же применяете адаптер, удалите батарейку питания.
- Если поверхность весов влажная, имеется опасность скольжения. Следите за тем, чтобы поверхность весов находилась в сухом состоянии!
- Держите весы в сухом помещении, это защитит электронные детали весов от попадания влаги.
- Не разбирайте весы, пытаясь починить их. Только замену батареек питания осуществляйте собственноручно.

Адаптер соответствует следующему стандарту:

стандарт низкого уровня напряжения 73/23/EEC, 93/68/EEC, EN 61558-2-6:1997+A1+A11

H-972

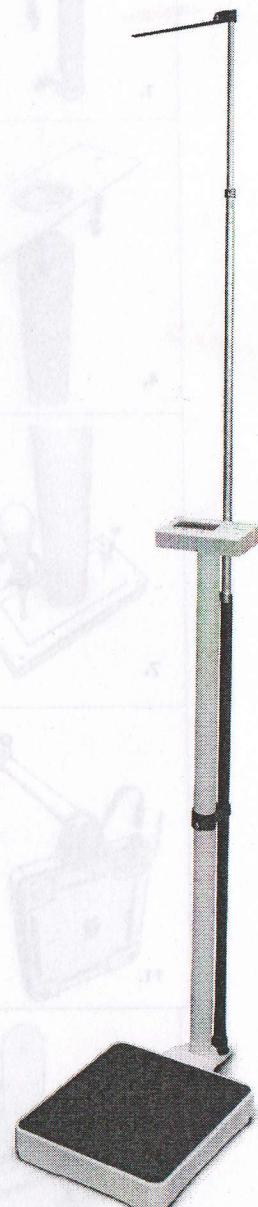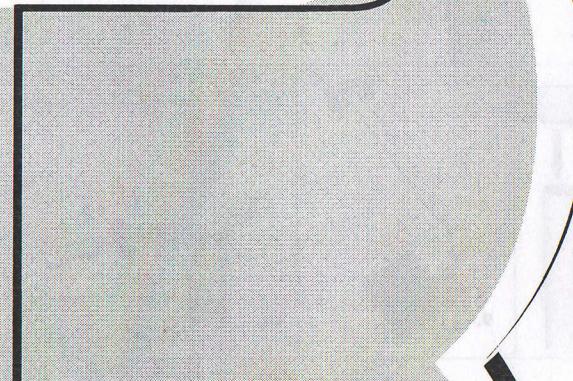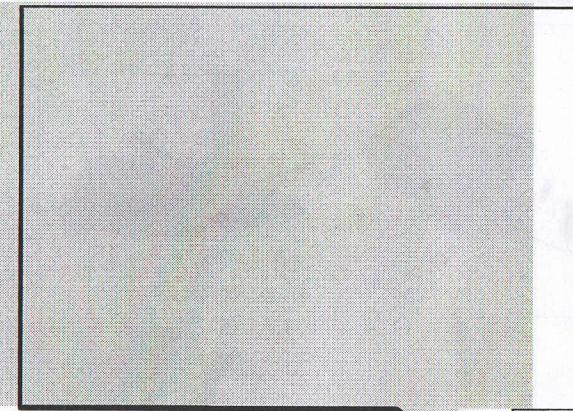

Model 5964

Hungary
H-2400 Dunaújváros,
Papírgyári út 12-14.
Tel: +36-25-555-100
Fax: +36-25-401-823
Web: www.momert.hu
E-mail: info@momert.hu